

2013年 6月 11日

お客様各位

株式会社サンメディカル技術研究所

バックアップコントローラ CT240 メンテナンスポートカバー仕様変更のご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、植込み型補助人工心臓 EVAHEART システムに使用いたします、C02 シリーズのバックアップコントローラ CT240 につきまして、メンテナンスポートカバーの仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。変更品は6月より順次出荷いたします。

なお、現在メンテナンスポートに誤ってACアダプタを挿入しないよう暫定対応として封印シールを貼り付けてご使用いただいておりますが、新しいメンテナンスポートカバーを装着するキットを配布いたします。既にご使用されておりますバックアップコントローラ CT240 につきましては、ご面倒をお掛けいたしますが、添付の手順書に従って、メンテナンスポートカバーを装着していただきますよう、宜しくお願い申し上げます。


ご迷惑とご負担をおかけいたしますが、何卒、ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹 白

変更内容

- ▶ メンテナンスポート封印シールを、メンテナンスポートカバーに変更いたします。
- ▶ 品番、価格等に変更はございません。

なお、今回の製品変更によって、「バックアップコントローラ CT240」の機能・性能の変更はありません。

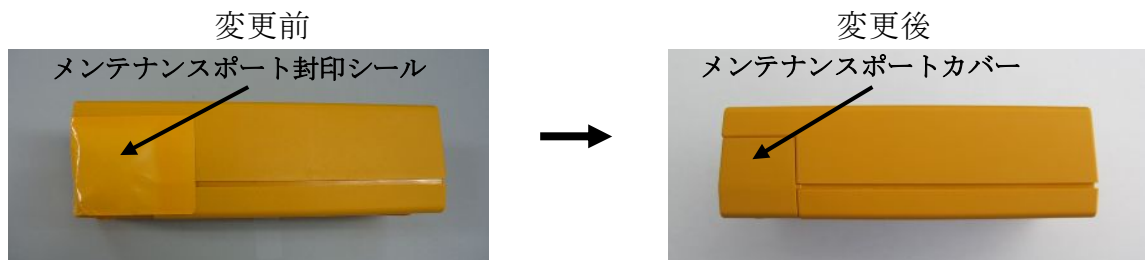

対象製品

カタログ番号 (ユニットコード)	製品名	JANコード	変更開始ロット番号
CT240	バックアップコントローラ	4562272470517	CT240-0060 より

添付資料：「バックアップコントローラカバー装着手順書」

【お問い合わせ先】

株式会社サンメディカル技術研究所 渉外チーム

TEL:0266-54-1900(代表) FAX:0266-58-6443 E-mail:tech@evaheart.co.jp

以上