

お客様各位

株式会社サンメディカル技術研究所

植込み型補助人工心臓 EVAHEART コントローラ C02 シリーズ
CS210 クールシールユニットの製品仕様変更のお知らせ

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当社製品におきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「C02 クールシールユニット（CS210）」におきまして、下記の仕様内容を変更いたしましたのでご案内申し上げます。何卒、ご了承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

変更内容

- **変更1：シリコンオイル塗布**
 カプラー脱着時のカプラーOリング外れを防止するために、Fig.1のカプラーOリング部にシリコンオイルを塗布し、円滑なカプラー脱着ができるようにしました。今回使用したシリコンオイルは生体の安全性が確認されているものを使用しています。
- **変更2：チューブ固定**
 コントローラのフタを閉める際のカプラー接続部（2個）の収納性の向上と、クールシール液往路側（赤）の蛇腹チューブの収納の状態を同等とするために、Fig.2に示した箇所に両面テープを貼りクールシールユニットから出るチューブを固定させました。
- **変更3：パッキン追加、及び接着剤塗布**
 クールシールユニット内への水の浸入を防止するために、Fig.3のとおり、シリコンゴム製のパッキンの装着、及びケース接合部へのシリコン接着剤の塗布を行いました。
- 品番、価格等に変更はございません。
- 今回の製品変更による、クールシールシステム全体に影響する機能・性能の変更はありません。

Fig.1 シリコンオイル塗布

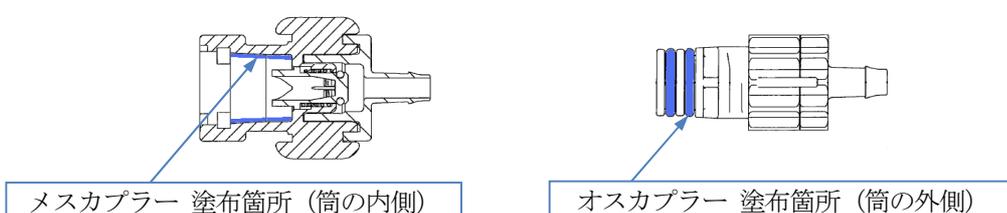


Fig.2 チューブ固定


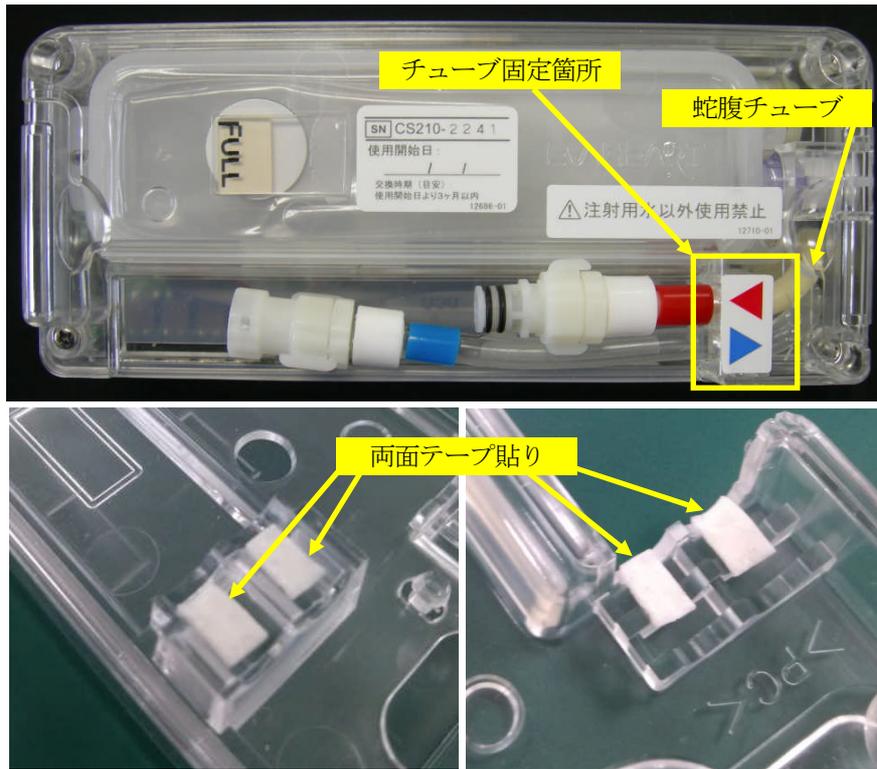


Fig.3 パッキン追加、及び接着剤塗布

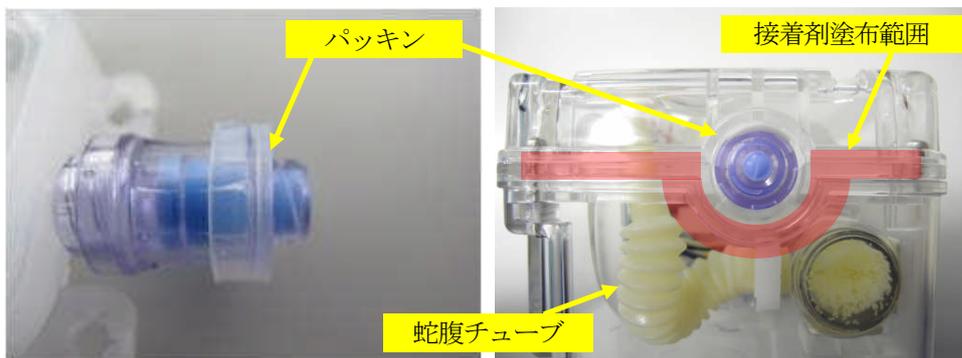

対象製品

カタログ番号 (ユニットコード)	製品名	JANコード	変更内容	変更開始 製品製造番号	
CS210	クールシール ユニット	4562272470463	変更 1	シリコンオイル塗布	CS210-2310～
			変更 2	チューブ固定	CS210-2310～ [CS210-2366～2395 除く]
			変更 3	パッキン追加、 及び接着剤塗布	CS210-2401～

[お問い合わせ先]

株式会社サンメディカル技術研究所 マーケティングG

TEL:0266-54-1900(代)

以上