

2013年 11月 11日

お客様各位

株式会社サンメディカル技術研究所

CS220 流路洗浄キットカプラ嵌合部へのスリーブ追加のお知らせ

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品におきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「CS220 流路洗浄キット」につきまして、流路洗浄キット嵌合部の改善を行いましたのでご案内いたします。変更品の出荷は、随時行ってまいります。

ご迷惑とご負担をおかけいたしますが、宜しく願申し上げます。

謹 白

変更内容


CS220 流路洗浄キット嵌合部からクールシール液が漏出する事象が発生いたしました。これに伴い、嵌合部にスリーブを追加することで、製造時のバラツキを低減させ、クールシール液の漏出を抑えました。

- CS220 流路洗浄キットにスリーブを装着いたします。
- 品番、価格等に変更はございません。

変更前



変更後

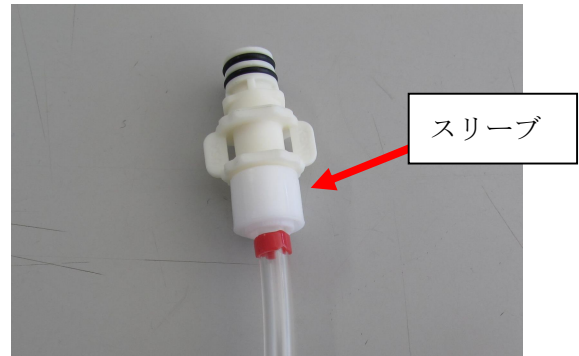

排液側に関しても、同様のスリーブを装着いたします。

対象製品

カタログ番号 (ユニットコード)	製品名	JANコード	変更開始 ロット番号
CS220	流路洗浄キット	4562272470470	CS220-0015

[お問い合わせ先]

株式会社サンメディカル技術研究所 営業グループ

TEL:0266-54-1900(代表)

FAX:0266-58-6443

E-mail:tech@evaheart.co.jp

以上